

VALO™ X

BROADBAND LED CURING LIGHT



ZES NIEUWE KLEUREN

ONVERANDERD
INDRUKWEKKENDE POWER

NIEUWE KLEUREN

- Laat uw persoonlijke stijl in de praktijk spreken met een sprankelende, tijdloze kleur

HOOGWAARDIG LUCHTVAARTALUMINIUM

- Het ontwerp uit één stuk is uitzonderlijk duurzaam en zorgt voor uitstekende thermische regulering

EENVOUDIGE INTERFACE

- De uithardingsstanden en diagnostische hulpstanden worden aangegeven, bediend en geactiveerd met knoppen aan de boven- en onderkant of door de accelerometerfunctie

GROTERE LENS

- De lens van 12,5 mm bedekt elk gebitselement, met behoud van toegankelijkheid en patiëntcomfort

ACCELEROMETERFUNCTIE

- Voor snel en gemakkelijk wisselen tussen uithardings- en lichtdiagnostiekstanden

CHIPSET MET 12 LEDS

- Leverd licht met een hoge intensiteit en een breed spectrum, voor uitstekende uniformiteit, uithardingsdiepte en collimatie van de lichtbundel

5 JAAR GARANTIE

- Met vijf jaar fabrieksgarantie

MULTI-CONFIGURATIE

- Geschikt voor gebruik met of zonder snoer

UITHARDINGSSTANDEN: Standard Power Mode, Xtra Power Mode | **DIAGNOSTISCHE HULPSTANDEN:** White Light Diagnostic Aid Mode, Black Light Diagnostic Aid Mode

WISSELEN TUSSEN STANDEN


UITHARDINGSSTANDEN: Beweeg de VALO X-polymerisatielamp naar voren met een polsbeweging om toegang te krijgen tot de uithardingsstanden en er tussen te wisselen.



DIAGNOSTISCHE LICHTSTANDEN: Beweeg de VALO X-polymerisatielamp naar opzij met een polsbeweging om toegang te krijgen tot de diagnostische lichtstanden en er tussen te wisselen.

LENSACCESSOIRES


TWEE UITHARDINGSLENZEN

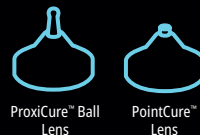

ProxiCure™ Ball Lens
5889

PointCure™ Lens
5890

DRIE DIAGNOSTISCHE LENZEN

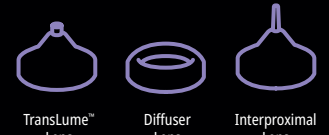

TransLume™ Lens
5891

Diffuser Lens
5892

Interproximal Lens
5893

VALO X Colors Kit –

- 1 x VALO X-ledpolymerisatielamp
- 1 x Diffuser Lens
- 2 x oplaadbare batterijen
- 1 x batterijoplader
- 1 x veiligheidsschermpje
- 1 x proefverpakking beschermhulzen
- 1 x netvoeding (voor batterijoplader of snoeradapter*)

- **6496** HORIZON RED
- **6497** AURORA PINK
- **6498** STARDUST GRAY
- **6499** NEBULA GREEN
- **6519** TWILIGHT BLUE
- **6538** GALAXY PURPLE
- **6539** ONYX BLACK

5973 - VALO X Kit –



- 1 x VALO X-ledpolymerisatielamp
- 5 x extra lenzen
- 2 x oplaadbare batterijen
- 1 x batterijoplader
- 1 x netvoeding (voor batterijoplader of snoeradapter)
- 1 x snoeradapter
- 1 x handstukhouder
- 1 x veiligheidsschermpje
- 1 x proefverpakking beschermhulzen

Accessoires

- 4951** VALO X-batterijoplader
- 4952** Netvoeding met universele stekkers
- 5189** VALO X-netsnoer
- 5437** VALO X-batterijen 2 stuks
- 4665** VALO X-beschermhulzen 100 stuks
- 5898** VALO X-beschermhulzen 600 stuks

*Snoeradapter niet inbegrepen.

