

**SYSTEMATISCHE TANDZORG**  
PREVENTIE EN MINIMAAL-INVASIEVE THERAPIE

# LUNOS

MAKING SMILES BRIGHTER



## PREVENTIE

# OMDAT PREVENTIE GOED IS VOOR EEN GEZOND GEBIT.

Voor bijna alle behandelingen binnen de klassieke tandheelkundige profylaxe biedt het Lunos-profylaxesysteem van Dürer Dental een compleet assortiment aan apparatuur, verbruiksmaterialen en handige accessoires, allemaal van één leverancier.



Video over het  
Lunos-profylaxesysteem

## THERAPIE

---

# OMDAT THERAPIE EN PREVENTIE SAMENGAAN.

Preventieve tandheelkunde heeft haar grenzen. Aandoeningen van het parodontium behoren tot de meest voorkomende aandoeningen, dus in veel gevallen is parodontale therapie vereist. Het Lunos-profylaxesysteem ondersteunt hier met een modern en effectief productportfolio.

Met name op het gebied van ondersteunende tandheelkundige nazorg is Dürr Dental een sterke en betrouwbare partner, met het unieke Vector-systeem en het MyLunos-poederstraalhandstuk – voor perfecte ondersteuning van het volledige praktijkteam.



# MAKKELIJK TE HANTEREN, VEELZIJDIG EN KRACHTIG DANKZIJ STRAALTECHNOLOGIE.

Het MyLunos poederstraalhandstuk\* combineert een lichtgewicht ontwerp met kracht en ergonomie en is ideaal voor het verwijderen van verkleuringen, aanslag en biofilms. Het handstuk volgt onze strikt systematische werkwijze – van voorbereiding en toepassing tijdens de behandeling tot aan de reiniging. MyLunos biedt maximale flexibiliteit en efficiëntie.\*


## SUPRA- EN SUBGINGIVALE BEHANDELING



Eén voor alles – het MyLunos poederstraalhandstuk biedt grote vrijheid in de behandeling. Of het nu gaat om supra-gingivale verwijdering van verkleuringen of om subgingivale reiniging van wortel- en implantaatoppervlakken: dankzij het snel wisselen van de twee spray-nozzles verlopen de behandelprocessen soepel en zonder onderbreking.

## PERFECTE ERGONOMIE

Veel factoren dragen bij aan een optimaal ergonomisch ontwerp: gewicht, zwaartepunt, materiaal, vorm, afmetingen en haptiek. MyLunos houdt met al deze aspecten rekening. Het oppervlak is antislip en de vorm van het handstuk sluit perfect aan op de natuurlijke vorm van de hand. Samen met de beschikbare spray-nozzles is MyLunos een bijzonder ergonomisch systeem.

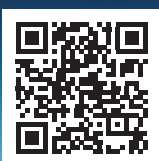

Video over  
MyLunos



\* Verkrijgbaar voor turbinekoppelingen van KaVo, Sirona, W&H, BienAir en NSK.

## HANDSTUK EN AFZONDERLIJKE ONDERDELEN KUNNEN GEHEEL MACHINAAL WORDEN GEREINIGD.

De onderdelen van het handstuk die gereinigd kunnen worden zijn gemaakt van temperatuurbestendig materiaal en zijn daarom gemakkelijk thermisch te desinfecteren en autoclaveren.



POEDERSTRALEN

## WISSELKAMERPRINCIPE

Zeer eenvoudig te verwisselen dankzij de bajonetaansluiting – ook tijdens de behandeling. Afhankelijk van de behoefte kan er met verschillende poeders worden gewerkt, zoals met de Lunos-profylaxepoeders Gentle Clean en Perio Combi.



## VOORBEREIDING VAN DE POEDERRESERVOIRS

Dankzij de veilige vergrendeling kunnen de containers eenvoudig van tevoren worden gevuld. De slimme opbergtrays zorgen voor flexibel en efficiënt vullen en opbergen. De containers zijn verkrijgbaar in vijf verschillende kleuren.



# HET VECTOR-SYSTEEM – ÉÉN APPARAAT VOOR HET HELE TEAM.

Zelfs na meer dan 25 jaar blijft de Vector-methode de referentie voor minimaal invasieve, pijnarme parodontale behandelingen met een minimale hoeveelheid aerosol. Dankzij de unieke lineaire methode voor het afleiden van trillingen in het Vector-handstuk zorgt dit systeem ervoor dat de natuurlijke gebitstructuur behouden blijft. Hierdoor worden sub- en supragingivale afzettingen en biofilms effectief verwijderd, het aantal pathogene bacteriën verminderd, terwijl het relatief zachte worteldentine en het regeneratieve weefsel beschermd blijven.

## VECTOR FLUID POLISH



Vector Fluid Polish ondersteunt in combinatie met het Vector-systeem de reiniging van tandoppervlakken, tandprotheses en worteloppervlakken en zorgt daarbij voor een pijnarme behandeling. Met hydroxyapatiet, calciumfosfaat en een fris muntaroma.

### VRIJ VAN:

- ✓ DIERLIJKE INHOUDS-STOFFEN
- ✓ LACTOSE
- ✓ GLUTEN
- ✓ FRUCTOSE

## INTUÏTIEVE BEDIENING



De oppervlakken van het overzichtelijk ingerichte bedieningspaneel zijn vrij van naden of voegen, waardoor ze voldoen aan de hoogste hygiënestandaarden.



## VECTOR- EN SCALERHANDSTUK

Vector handstuk met trillingsafleiding voor behoedzame subgingivale behandelingen. Scaler handstuk met 6 leds voor het beste overzicht bij de supra- en subgingivale toepassing. De handstukken kunnen volgens een gevalideerd proces manueel en machinaal volledig worden gereinigd.



## WATERRESERVOIR

Door een grote afneembare watertank kan er zonder vaste wateraansluiting worden gewerkt.



## ERGONOMISCH WERKEN

Beide handstukken overtuigen door een hoge mate van gebruiksvriendelijkheid.



Video over het  
Vector-systeem

# LUNOS-POLIJSTPASTA'S – BEHOEDZAAM EN GRONDIG.

Het juiste product voor iedere patiënt: van het zacht verwijderen van verkleuringen of tandplak tot het polijsten van bijzonder gevoelige oppervlakken. Met of zonder smaak zijn Lunos Prophy Pastes zowel zacht voor het tandweefsel als grondig in resultaat. De zelfreducerende Lunos Prophy Paste Two in One bespaart bovendien extra tijd voor zowel de gebruiker als de patiënt.

## LUNOS POLIJSTPASTA TWO IN ONE



Geschikt voor elke behandelings-behoefte in het kader van supragingivale professionele reinigingsmaatregelen. De pasta's zijn bijzonder behoedzaam voor de tandsubstantie met een RDA van < 28\*.

Hydroxylapatiet ondersteunt de remineralisatie.

## REINIGT EN POLIJST IN ÉÉN



De innovatieve Two-in-One-oplossing: verkleuringen verwijderen en polijsten in één keer. Tijdbesparend en toch substantievriendelijk en grondig.

De abrasiviteit van de pasta neemt geleidelijk af dankzij de zelfreducerende polijstdeeltjes.

## TWO IN ONE



Verkoopenheid: 1 x 100 g

## Smaken:

NEUTRAL

ORANGE

MINT

## LUNOS PROFYLAXERING

Past om elke vinger, zo kan polijstpasta eenvoudig worden aangebracht en is ergonomisch gebruik mogelijk. De container is vrij van scherpe randen en bijzonder eenvoudig te reinigen.



## SUPER SOFT



Verkoopenheid: 1 x 50 g

## LUNOS POLIJSTPASTA SUPER SOFT

Duurzaam voorzichtig fijn polijsten, ook van bijzonder gevoelige oppervlakken. Dankzij de bijzonder lage RDA < 5\* kan de pasta universeel worden gebruikt, ook op implantaten, KFO-apparaten en prothetische voorzieningen.

Het zorgt voor gladde en zeer glanzende oppervlakken, waardoor de opbouw van nieuwe aanslag wordt vertraagd.

Hydroxylapatiet ondersteunt de remineralisatie.




## VRIJ VAN:

- ✓ DIERLIJKE INHOUDSSTOFFEN
- ✓ LACTOSE
- ✓ GLUTEN
- ✓ FRUCTOSE



## Smaken:

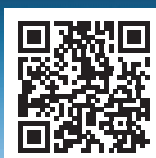

Video over de  
Lunos polijstpasta's

\* Lees de gebruiksaanwijzing!

# GEZONDE TANDEN OP EEN DOOR



## LUNOS CART

Voor mobiel gebruik in de behandelkamer, optimale flexibiliteit en waar nodig eenvoudig te positioneren.

- Soft-close lade met compartimenten voor het opbergen van behandelmateriaal
- Verborgene kabelgoot voor geoptimaliseerde kabelopslag met een flexibele meervoudige stekkerdoos.
- Geluidsarme wieltjes met parkeerrem
- Ideaal voor een table-top combinatieapparaat en het Vector ultrasoonapparaat.



## VISTACAM IX HD SMART

Het camerasysteem biedt betrouwbare en effectieve ondersteuning bij de diagnose van cariës en het zichtbaar maken van tandplak. Tijdens afspraken bij de mondhygiënist kunt u patiënten duidelijk laten zien waar extra aandacht bij het poetsen nodig is. Dankzij de fluorescentietechnologie is het visualiseren van afzettingen eenvoudig: gebruik gewoon de verwisselbare Proof-kop. Met behulp van "voor" en "na"-foto's kunt u bovendien het belang en de toegevoegde waarde van professionele tandreiniging aan uw patiënten benadrukken. Het multi-kop camerasysteem is een echte aanwinst voor iedere tandartspraktijk, zowel voor patiëntconsulten als ook voor diagnostische ondersteuning.



## LUNOS PROFYLAXEKUSSEN

Voor een veilige en comfortabele ondersteuning van het hoofd. Ondersteunt hals en nek.

- Eenvoudig en snel met klittenband te bevestigen aan de hoofdsteun van de behandelstoel
- Het visco-elastische schuimmateriaal verlicht drukpunten en reageert op lichaamswarmte, zodat het zich individueel aan elke patiënt aanpast.
- Zachte, huidvriendelijke en waterdichte hoes
- Afwasbaar en desinfecteerbaar



## PROFYLAXECANULE

Een speciaal ontwikkelde draaibare en vergrendelbare beschermkap zorgt voor een hogere opname van aerosolen en een bijzonder effectieve, ergonomische afzuiging bij profylactische behandelingen met poederstralers.

- Een dubbele aerosolopname in vergelijking met bestaande canules
- Voorkomen van slijmvliesirritatie door het gebruik van poederstraal
- Ergonomische behandeling
- Secundaire luchtinlaten ter vermindering van reflux

Verkoopenheid: 1 stuk

# DACHTTE MANIER.

POEDERSTRALEN



**VRIJ VAN:**

- ✓ DIERLIJKE INHOUDS-STOFFEN
- ✓ LACTOSE
- ✓ GLUTEN
- ✓ FRUCTOSE

## LUNOS PROFYLAXEPOEDER

### Gentle Clean

- Supragingivale reiniging
- Innovatief schuurmiddel trehalose (ca. 65 µm)
- Vier smaken

Verkoopenheid: 4 x 180 g

### Perio Combi

- Sub- en supragingivale reiniging
- Ideaal voor herhalingsbehandelingen.
- Voor de ondersteuning van de nazorgbehandeling
- Innovatief schuurmiddel trehalose (ca. 30 µm)

Verkoopenheid: 4 x 100 g

BESCHERMING EN VERSTEVIGING



## LUNOS FISSUURVERZEGELING

Voor de profylactische verzegeling van fissuren, holtes, carieuze laesies van melktanden en het vaste gebit en voor de verzegeling van beschadigd glazuur en na een afgeronde kaakbehandeling.

- Aanbrengen bij voorkeur op vochtig of op gedroogd tandglazuur
- Licht-uithardend

### Verkrijgbaar in:

Opaque (met fluoride)

Verkoopenheid: 2x spuit van 1,5 g

BESCHERMING EN VERSTEVIGING



**VRIJ VAN:**

- ✓ DIERLIJKE INHOUDS-STOFFEN
- ✓ LACTOSE
- ✓ GLUTEN
- ✓ FRUCTOSE

## LUNOS FLUORIDEGEL

Voor profylaxe tegen tandcariës met behulp van natriumfluoride.

- Voor remineralisatie van het tandglazuur
- Bevat 12300 ppm fluoride

Verkoopenheid: 1 x 250 ml

RECALL



## LUNOS PROPHY WELLNESSDOEK

Verfrissende handdoek, ideaal voor de gezichtsreiniging na de profylaxebehandeling.

- Individuele service voor de patiënt
- Warme en koude toepassing mogelijk
- Verzorgt de huid met aloë vera

Verkoopenheid: 50 doekjes afzonderlijk verpakt

[WWW.LUNOS-DENTAL.COM](http://WWW.LUNOS-DENTAL.COM)

DÜRR DENTAL SE  
Höpfigheimer Str. 17  
74321 Bietigheim-Bissingen  
Germany  
[www.duerrdental.com](http://www.duerrdental.com)  
[info@duerrdental.com](mailto:info@duerrdental.com)

Wijzigingen voorbehouden

